Versuchsprotokoll zum Versuch Nr. 601

Franck-Hertz-Versuch

Johannes Kollek johannes.kollek@udo.edu $\label{lem:condition} \begin{tabular}{ll} Jean-Marco Alameddine@udo.edu\\ jean-marco.alameddine@udo.edu\\ \end{tabular}$

Durchführung: 19.04.2016

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	3
	1.1 Systematischer Aufbau und die Gegenfeldmethode	3
	1.2 Störeffekte	
2	Fehlerrechnung	6
3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
	3.1 Aufbau	7
	3.2 Durchführung	8
	3.2.1 Bestimmung der integralen Energieverteilung	8
	3.2.2 Aufnahme der Frank-Hertz-Kurven	8
	3.2.3 Bestimmung der Ionisierungsspannung	8
4	Auswertung	9
5	Diskussion	10

1 Theorie

Beim Franck-Hertz-Versuch geht es darum, die Strukturauflösung der Elektronenhülle von Atomen zu untersuchen. Dies erfolgt über ein Elektronenstoßexperiment.

Aus einer Quelle beschleunigte Elektronen stoßen dabei auf Hg-Atome, wobei zwischen zwei Fällen unterschieden wird. Zunächst können elastische und unelastische Stöße zwischen den ausgesandten Elektronen und dem Hg-Atom auftreten.

Der erste Fall führt auf Grund des hohen Massenunterschiedes zu einem hinreichend kleinen Energieverlust, jedoch einer großen Richtungsänderung des Elektrons. In letzterem Fall wird eine diskrete Energiemenge auf ein Hüllenelektron des Hg-Atoms übertragen. Durch diese Energiemenge steigt das Hg-Atom vom ursprünglichen Energiezustand E_0 in einen angeregten Zustand der Engerie E_1 auf. Die Information über die Differenz der Energiezustände spiegelt sich in der Differenz der Energie des Stoßpartners in der Gleichung

$$\frac{m_0 \cdot v_{\text{vor}}^2}{2} - \frac{m_0 \cdot v_{\text{nach}}^2}{2} = E_1 - E_0 \tag{1}$$

wieder. Um diese Information wahrzunehmen, muss demnach die kinetische Energie des Elektrons vor und nach dem Stoß bekannt sein. Befindet sich nun ein Hg-Atom in einem angeregten Zustand emittiert es nach einer Relaxationszeit der Größenordnung 10^8 s ein Lichtquant der Energie

$$h\nu = E_0 - E_1. \tag{2}$$

Dabei beschreibt h das Plancksche-Wirkungsquantum und ν die Frequenz eben dieses Lichtquants.

1.1 Systematischer Aufbau und die Gegenfeldmethode

Der Versuchsaufbau besteht aus einem mit Hg-Dampf gefüllten Glaskorpus, wie der aus Abbildung 1.

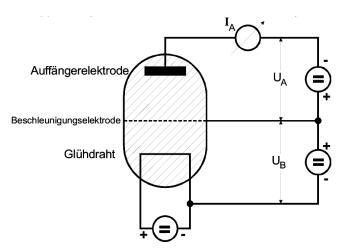


Abbildung 1: Systematischer Aufbau einer Franck-Hertz-Röhre. [sample]

Ein Glühdraht, unten in der Abbildung, dient als Elektonenquelle. Die ausgesandten Elektronen werden durch eine gitterförmige Beschleunigungselektrode in Richtung einer Auffängerelektrode

beschleunigt. An der Beschleunigungselektrode angekommen haben die Elektronen eine kinetische Energie von

$$\frac{m \cdot v^2}{2} = eU_{\rm B},\tag{3}$$

wenn angenommen wird, dass sie beim Austritt aus dem Glühdraht keine Geschwindigkeit haben. Nach dem Passieren der Beschleunigungselektrode werden die Elektronen abgebremst, da die Auffängerelektrode negativ geladen wird. Es sollen nur die Elektronen ankommen die eine Energie von

$$\frac{m \cdot v^2}{2} \ge eU_{\mathcal{A}} \tag{4}$$

haben. Dieses Verfahren wird als Gegenfeldmethode bezeichnet. Wird nun die Beschleunigungsspannung erhöht, fangen immer mehr Elektronen an, die Auffängerelektrode zu erreichen. Ab einem bestimmten Energiewert, dargestellt in Gleichung 1, der der Anregungsenergie der Hg-Atome entspricht, beginnen sie an Stelle von Elastischen unelastische Stöße mit den Hg-Atomen auszuführen. Bis zu diesem Phänomen steigt die Stromstärke an der Auffängerelektrode an, ehe sie je absinkt, da die Elektronen nun nicht mehr die nötige Energie besitzen, um sie zu erreichen. Bei weiterem Erhöhen der Beschleunigungsspannung steigt die Energie der Elektronen nach dem unelastischen Stoß wieder an bis sie erneut genug Energie für eben diesen haben. Demnach sollte die Stromstärke der Auffängerelektrode in Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung etwa so aussehen wie in Abbildung 2.

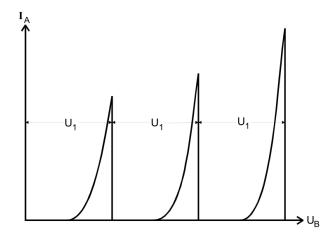


Abbildung 2: Theoretische Darstellung einer Franck-Hertz-Kurve. [sample]

Die Stromstärke ist demnach ein Indikator, ab welcher Beschleunigungsspannung die Atome angeregt werden. Zudem stellt die Differenz U_1 , zwischen den äquidistanten Maxima,

$$U_1 = \frac{1}{e}(E_1 - E_0), \tag{5}$$

multipliziert mit der Elementarladung die Anregungsenergie dar. Tatsächlich sorgen jedoch Störungseffekte für ein Abrunden und Verbreiterung der Kurve, wobei der Abstand zwischen den Maxima konstant bleibt.

1.2 Störeffekte

Ein Störeffekt wird durch das Kontaktpotential ausgelöst. Das Potential zwischen Elektrode und Heizdraht unterscheidet sich von der angelegten Spannung $U_{\rm B}$. Dies passiert, wenn die sich die Austrittsarbeiten der Materialien unterscheiden. Der Vorteil ist, dass bei hohen Temperaturen dadurch für eine hohe Emissionsrate gesorgt ist. Nachteilig ist jedoch, dass die angelegte Spannung

$$U_{\rm B,eff} = U_{\rm B} - \frac{1}{e}(\Phi_{\rm B} - \Phi G) = B - K$$
 (6)

um das Kontaktpotential K verschoben wird.

Zudem besitzen die Elektronen bei Austreten aus dem Glühdraht nicht alle keine Energie sondern besitzen ein Energiespekrum folglich der Fermi-Dirac-Verteilung in Metallen. Sie besitzen beim Austreten also mehr oder weniger Energie als ihre Kollegen, was in einer Verbreiterung der Franck-Hertz-Kurve führt, wodurch sich das Maximum nicht mehr so genau lokalisieren lässt. Außerdem äußern sich die verschiedenen Enegrien darin, dass die Stromstärke nicht mehr auf Null sondern auf ein Stromminimum absinkt.

Desweiteren sorgen die in den Richtungsänderungen resultierenden elastischen Stößen zwischen Auffänger- und Beschleunigungselektrode, dass nicht mehr soviele Elektronen ankommen können. Es ist ein weiteres Kriterium, welches eine Abflachung und Verbreiterung erklärt.

Der letzte große Einfluss wird durch den Hg-Dampfdruck ausgelöst. Der Dampfdruck bestimmt letztendlich die Wahrscheinlichkeit, mit der es zu einem Stoßprozess kommt. Damit dies möglichst häufig passiert, muss die mittlere freie Weglänge \overline{w} der Atome etwa 1000 bis 4000 mal kleiner sein als der Abstand zwischen Kathode und Beschleunigungselektode. Für sie gilt

$$\overline{w}[\text{cm}] = \frac{0,0029}{p_{\text{sätt}}}[\text{p in mbar}], \tag{7}$$

wobei

$$p_{\text{sätt}} = \exp(-6876/T),\tag{8}$$

von der Temperatur T abhängt. Hierbei ist es wichtig ein geeignetes Mittelmaß einzustellen, da bei zu geringem Druck die Elektronen womöglich ohne Stoß die Apparatur durchlaufen und bei zu hohem Druck die Auffängerelektrode nicht erreichen können, da es zu zu starken Richtungsänderungen kommt.

2 Fehlerrechnung

Dieses Kapitel listet kurz und bündig die benötigten und aus den Methoden der Statistik bekannten Formeln für die Fehlerrechnung auf. Die Schätzung der Standardabweichung ist

$$\Delta X = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2} \ . \tag{9}$$

Der Mittelwert ist

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \tag{10}$$

Der Fehler des Mittelwertes ist

$$\Delta \overline{X} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2} \ . \tag{11}$$

Für fehlerbehaftete Größen, die auch in folgenden Formeln verwendet werden, muss die Fehlerfortpflanzung nach Gauß berücksichtigt werden.

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial X_i}\right)^2 \cdot (\Delta X_i)^2} \tag{12}$$

Bei der linearen Regressionsrechnung sind die Parameter m und b der Ausgleichsgerade y = mx + b wie folgt gegeben:

$$m = \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\overline{x^2} - \overline{x}^2} \qquad b = \overline{y} - m\overline{x} . \tag{13}$$

Dabei sind x_i und y_i linear abhängige Messgrößen. Der Fehler dieser Parameter wiederum errechnet sich aus

$$\sigma_m^2 = \frac{\sigma^2}{n(\overline{x^2} - \overline{x}^2)} \qquad \qquad \sigma_b^2 = \frac{\sigma^2 \overline{x^2}}{n(\overline{x^2} - \overline{x}^2)}$$
 (14)

3 Aufbau und Durchführung

3.1 Aufbau

Der Franck-Hertz-Versuch wird in einer Röhre durchgeführt, in der sich zwei Elektroden sowie ein Glühdraht befinden. Der Glühdraht, auf dem eine konstante Heizspannung gegeben wird, dient durch den auftretenden glühelektrischen Effekt als Elektronenquelle. Hierzu wird ein Metall mit einem hohen Schmelzpunkt, beispielsweise Wolfram, verwendet, so dass eine Elektronenwolke entsteht. Diese Elektronen werden zu einer gitterförmigen Beschleunigungsselektrode beschleunigt, welche sich in der Mitte der Röhre befindet. Durch Wahl einer passenden Beschleunigungsspannung U_B kann die Energiezufuhr der Elektronen gesteuert werden. Am Ende des Gefäßes befindet sich zudem eine Auffängerelektrode, welche die Elektronen durch eine zwischen der Beschleunigungs- und Auffängerelektrode anliegenen Spannung U_A abbremst. Die Anzahl der auftreffenden Elektronen kann mithilfe eines Picoamperemeters anhand des Auffängerstroms I_A bestimmt werden. Dieses Messgerät verstärkt und wandelt den geringen Eingangsstrom um, so dass dieser als Spannung auf die Y-Achse eines XY-Schreibers gegeben werden kann. Durch das zusätzliche Anlegen von U_A oder U_B am X-Eingang wird somit der Eingangsstrom in Abhängigkeit einer variablen Beschleunigungs- oder Bremsspannung graphisch dargestellt.

Zudem ist in der evakuierten Röhre eine geringe Menge Quecksilber platziert, welches je nach gewählter Umgebungstemperatur T einen variablen Dampfdruck $p_{\rm sät}$ besitzt. Die Temperatur wird mittels eines elektronischen Temperaturregler geregelt und anhand eines zusätzlich angebrachten Thermometers kontrolliert.

3.2 Durchführung

Zunächst wird das Innere der Röhre auf die gewünschte Temperatur gebracht, indem der Temperaturregler hochgestellt wird. Dies resultiert in einem ansteigenden Heizstroms. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird der Temperaturregler heruntergeregelt, so dass der Heizstrom wieder abnimmt und die Temperatur konstant gehalten wird. Der XY-Schreiber wird vor jedem Versuchsabschnitt justiert, so dass die gewünschten Messbereiche graphisch dargestellt werden können.

3.2.1 Bestimmung der integralen Energieverteilung

Um die Energieverteilung der Elektronen zu bestimmen wird die Beschleunigungsspannung auf einen konstanten Wert von $U_B=11\,\mathrm{V}$ eingestellt, die Bremsspannung wird von $0\,\mathrm{V}$ bis zu einem Verschwinden des Auffängerstroms durchlaufen. Der Strom wird hierbei auf die Y-Achse, die Bremsspannung auf die X-Achse des XY-Schreibers abgetragen. Es wird eine Messung bei $T=26,1\,\mathrm{^{\circ}C}$ sowie eine weitere Messung bei $T=145,5\,\mathrm{^{\circ}C}$ durchgeführt.

3.2.2 Aufnahme der Frank-Hertz-Kurven

Bei einer konstanten Bremsspannung von $U_A=1\,\mathrm{V}$ wird die Beschleunigungsspannung von $U_B=0\,\mathrm{V}$ bis ca. $U_B=55\,\mathrm{V}$ durchlaufen. Der Auffängerstrom wird widerum auf die Y-Achse gegeben, die Beschleunigungsspannung auf die X-Achse. Es werden Kurven bei $T=161\,\mathrm{^\circ C}$ sowie $T=178\,\mathrm{^\circ C}$ aufgenommen.

3.2.3 Bestimmung der Ionisierungsspannung

Um die Ionisierungsspannung zu ermitteln, wird eine Bremsspannung von $U_A=-30\,\mathrm{V}$ angelegt. Zudem wird die Beschleunigungsspannung erhöht, bis ein starker Ausschlag bei dem Auffängerstrom zu beobachten ist. Dementprechend wird U_B auf die X-Achse sowie der Auffängerstrom auf die Y-Achse abgetragen. Der Versuch wird bei $T=106,6\,^{\circ}\mathrm{C}$ durchgeführt.

4 Auswertung

5 Diskussion